

AIR-Q[®] 3

声门上气道



Air-Q®3 声门上气道 (SGA)

无论面临多么复杂的气道情况，先进的硅胶 Air-Q®3 产品都能帮助提供安全可靠的气道管理。独特的 ET 导管坡道和会厌提升器有助于快速、轻松、安全地进行插管。



AIR-Q®3

由于意外情况需要进行插管时，可实现极为方便的 ETT 的放置。



AIR-Q®3G

具有超宽胃入口，可容纳最大 18 Fr 的 OG 管和两个胃通道。



AIR-Q®SP3

使用正压通气对套囊进行自我加压。套囊压力在气道峰值压力和 PEEP 水平之间循环。




AIR-Q®SP3G

使用正压通气对套囊进行自我加压。套囊压力在气道峰值压力和 PEEP 水平之间循环。配有自加压套囊和超宽胃入口，可容纳最大 18 Fr 的 OG 管和两个胃通道。

轻松实现准确放置



Air-Q®3 声门上气道
可提供：

- 根据解剖学结构正确放置喉罩气道
- 提升会厌，最大限度地扩大通路
- 导向坡道，协助插入和放置 ETT

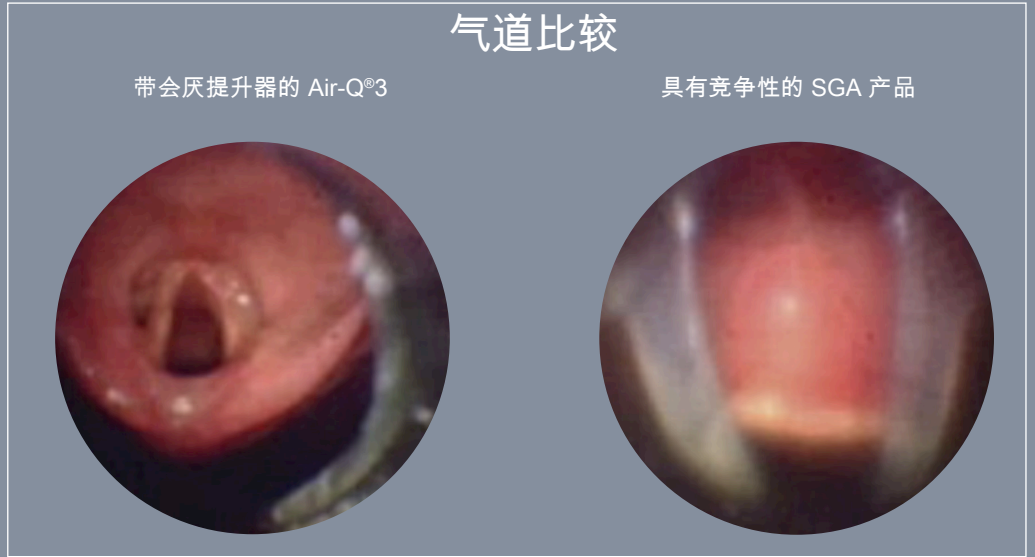

会厌提升器

我们独特的声门上气道包括会厌提升器和凸起的后缘，可优化气道的放置和密闭性。

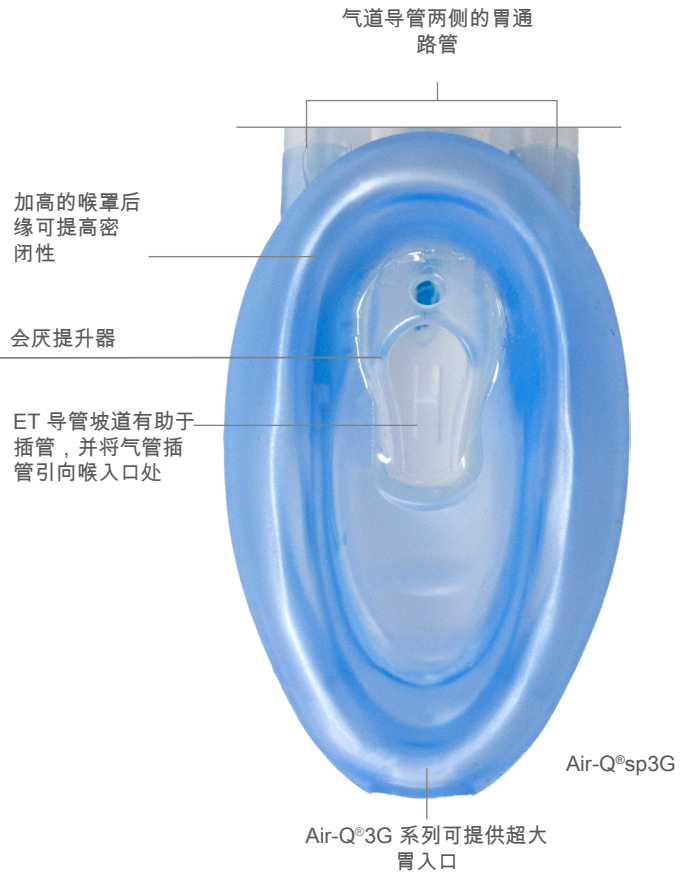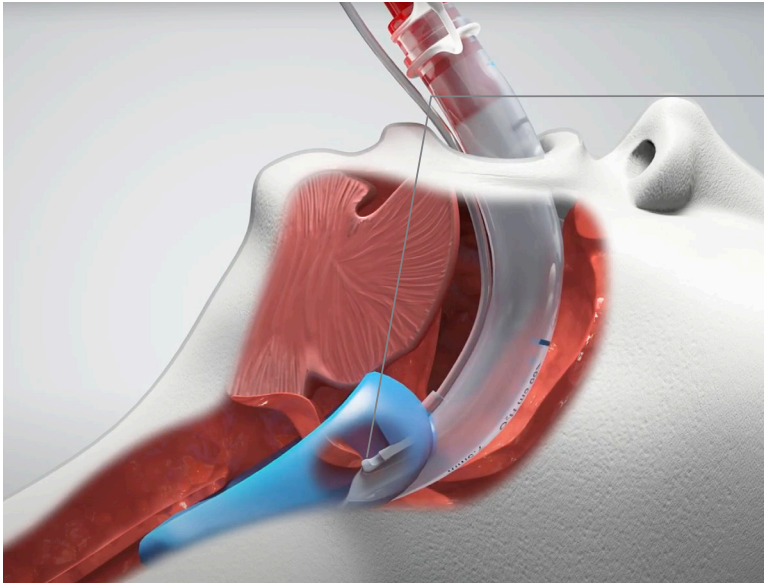

一次性撤管用管芯

产品	管芯尺寸	AIR-Q3 尺寸	最大 OETT 规格	重量	PK
10-1006	00	0 - 1.5	4.5 mm	4 - 17 kg	10
10-1005	0	2 - 3	6.0 mm	17 - 60 kg	10
10-1004	1	4 - 5	9.0 mm	> 60 kg	10



带 15 MM 接头的 AIR-Q®3 声门上气道

产品	描述	尺寸	理想体重	最大 OETT	张口度	管长度	最大 OG 管	充气量
30005	Air-Q3	0	< 2 kg	3.0 mm	5 mm	6 cm	—	0 – 0.5 mL
30055	Air-Q3	0.5	2 – 4 kg	4.0 mm	8 mm	7 cm	—	0 – 0.5 mL
30105	Air-Q3	1	4 – 7 kg	4.5 mm	11 mm	9 cm	—	0.5 – 1 mL
30155	Air-Q3	1.5	7 – 17 kg	5.0 mm	14 mm	11 cm	—	1 mL
30205	Air-Q3	2	17 – 30 kg	5.5 mm	17 mm	14 cm	—	1 – 2 mL
30305	Air-Q3	3	30 – 60 kg	7.0 mm	20 mm	16 cm	—	2 – 3 mL
30405	Air-Q3	4	60 – 80 kg	8.0 mm	23 mm	18 cm	—	3 – 4 mL
30505	Air-Q3	5	> 80 kg	9.0 mm	25 mm	20 cm	—	4 – 5 mL
50005	Air-Q3G	0	< 2 kg	3.0 mm	5 mm	6 cm	5 Fr	0 – 0.5 mL
50055	Air-Q3G	0.5	2 – 4 kg	4.0 mm	8 mm	7 cm	6 Fr	0 – 0.5 mL
50105	Air-Q3G	1	4 – 7 kg	4.5 mm	11 mm	9 cm	8 Fr	0.5 – 1 mL
50155	Air-Q3G	1.5	7 – 17 kg	5.0 mm	14 mm	11 cm	8 Fr	1 mL
50205	Air-Q3G	2	17 – 30 kg	5.5 mm	17 mm	14 cm	10 Fr	1 – 2 mL
50305	Air-Q3G	3	30 – 60 kg	7.0 mm	20 mm	16 cm	14 Fr	2 – 3 mL
50405	Air-Q3G	4	60 – 80 kg	8.0 mm	23 mm	18 cm	16 Fr	3 – 4 mL
50505	Air-Q3G	5	> 80 kg	9.0 mm	25 mm	20 cm	18 Fr	4 – 5 mL
40005	Air-Qsp3	0	< 2 kg	3.0 mm	5 mm	6 cm	—	—
40055	Air-Qsp3	0.5	2 – 4 kg	4.0 mm	8 mm	7 cm	—	—
40105	Air-Qsp3	1	4 – 7 kg	4.5 mm	11 mm	9 cm	—	—
40155	Air-Qsp3	1.5	7 – 17 kg	5.0 mm	14 mm	11 cm	—	—
40205	Air-Qsp3	2	17 – 30 kg	5.5 mm	17 mm	14 cm	—	—
40305	Air-Qsp3	3	30 – 60 kg	7.0 mm	20 mm	16 cm	—	—
40405	Air-Qsp3	4	60 – 80 kg	8.0 mm	23 mm	18 cm	—	—
40505	Air-Qsp3	5	> 80 kg	9.0 mm	25 mm	20 cm	—	—
60005	Air-Qsp3G	0	< 2 kg	3.0 mm	5 mm	6 cm	5 Fr	—
60055	Air-Qsp3G	0.5	2 – 4 kg	4.0 mm	8 mm	7 cm	6 Fr	—
60105	Air-Qsp3G	1	4 – 7 kg	4.5 mm	11 mm	9 cm	8 Fr	—
60155	Air-Qsp3G	1.5	7 – 17 kg	5.0 mm	14 mm	11 cm	8 Fr	—
60205	Air-Qsp3G	2	17 – 30 kg	5.5 mm	17 mm	14 cm	10 Fr	—
60305	Air-Qsp3G	3	30 – 60 kg	7.0 mm	20 mm	16 cm	14 Fr	—
60405	Air-Qsp3G	4	60 – 80 kg	8.0 mm	23 mm	18 cm	16 Fr	—
60505	Air-Qsp3G	5	> 80 kg	9.0 mm	25 mm	20 cm	18 fr	—