


# VentFLO™

## ETCO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> 鼻用采样套管

不含乳胶 | 供单个患者使用 | 一次性 | 不含 DEHP


SunMed 的 VentFLO™ EtCO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> 采样套管可在输送氧气的同时捕获呼出的 CO<sub>2</sub>。这些 EtCO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> 套管还具有亮橙色的反射式接头，兼容 Microstream™、Capnostream™ 和 Oridion™ 二氧化碳监测仪。

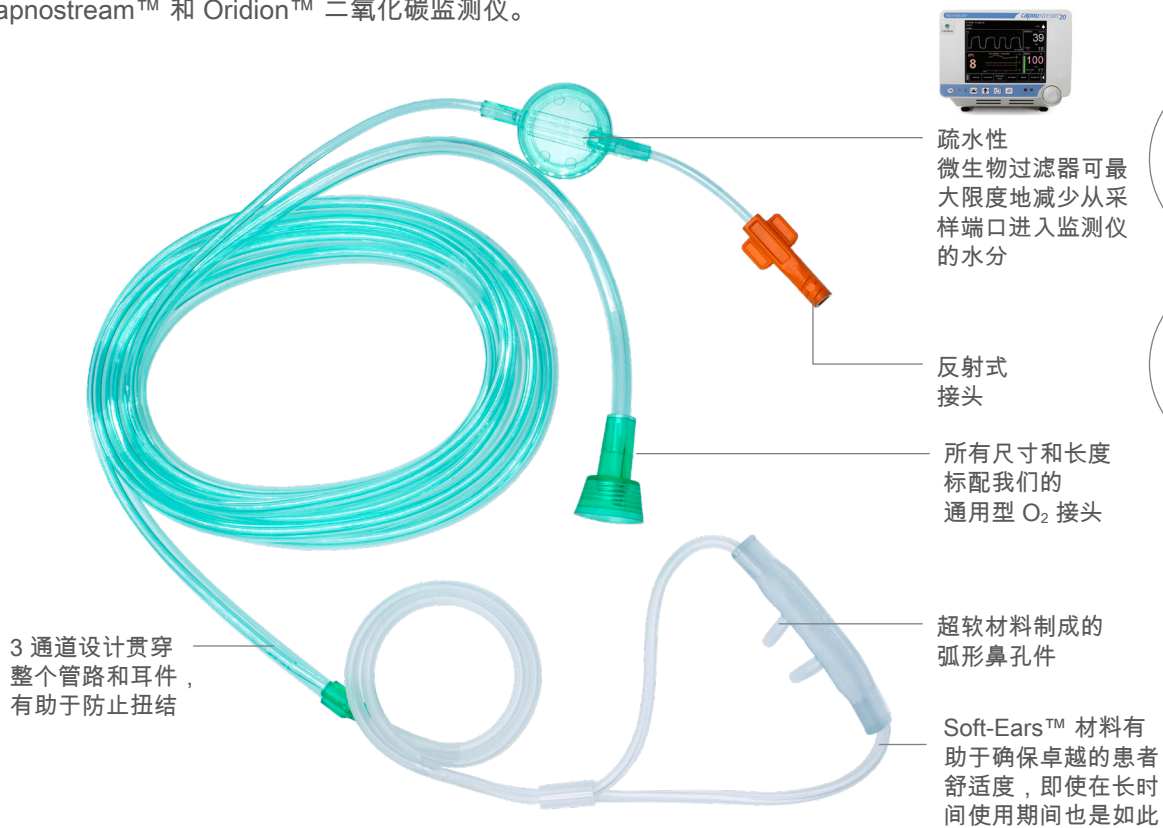

### VentFLO™ ETCO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> 鼻用采样套管

- 兼容采用 Microstream™ 技术的二氧化碳监测仪，例如 Medtronic Capnostream™ 35
- 在自主呼吸期间进行 CO<sub>2</sub> 采样的同时输送氧气
- 可防止新鲜氧气与 CO<sub>2</sub> 混合
- 3 通道管路可防止扭结
- 提供三种管路长度，每种都带有通用型 O<sub>2</sub> 接头

Microstream、Capnostream 和 Oridion 是 Medtronic 的商标，与 Medtronic 销售的产品相关。

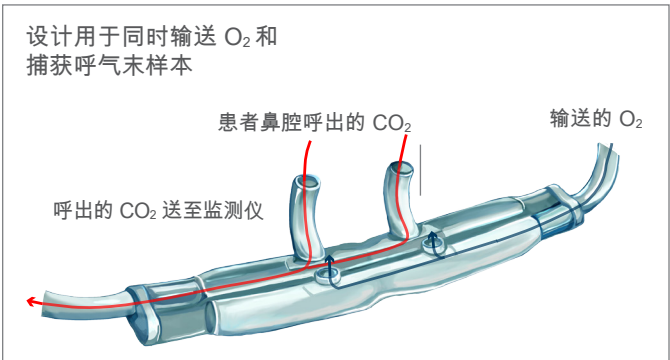


产品	描述	长度	PK
5107F-SE	成人 EtCO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> 鼻用套管	7'	25
5110F-SE	成人 EtCO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> 鼻用套管	10'	25
5114F-SE	成人 EtCO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> 鼻用套管	14'	25
5207F-SE	儿童 EtCO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> 鼻用套管	7'	25
5210F-SE	儿童 EtCO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> 鼻用套管	10'	25
5214F-SE	儿童 EtCO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> 鼻用套管	14'	25

# VentFLO™

## ETCO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> 口/鼻用采样套管

不含乳胶 | 供单个患者使用 | 一次性 | 不含 DEHP


SunMed 的 VentFLO™ EtCO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> 采样套管可在输送氧气的同时捕获呼出的 CO<sub>2</sub>。这些 EtCO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> 套管还具有亮橙色的反射式接头，兼容 Microstream™、Capnostream™ 和 Oridion™ 二氧化碳监测仪。

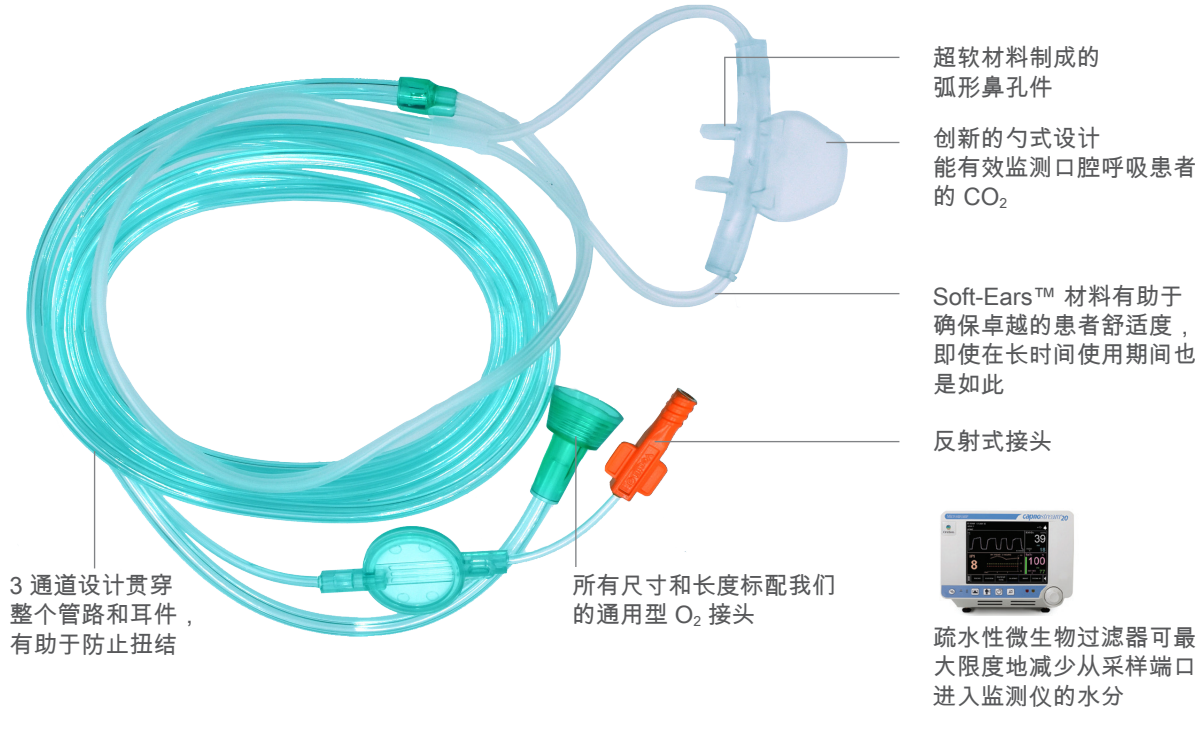

### VentFLO™ ETCO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> 口鼻用采样套管

- 适合口腔呼吸患者的创新设计
- 兼容采用 Microstream™ 技术的二氧化碳监测仪，例如 Medtronic Capnostream™ 35
- 在自主呼吸期间进行 CO<sub>2</sub> 采样的同时输送氧气
- 可防止新鲜氧气与 CO<sub>2</sub> 混合
- 3 通道管路可防止扭结
- 提供三种管路长度，每种都带有通用型 O<sub>2</sub> 接头

Microstream、Capnostream 和 Oridion 是 Medtronic 的商标，与 Medtronic 销售的产品相关。

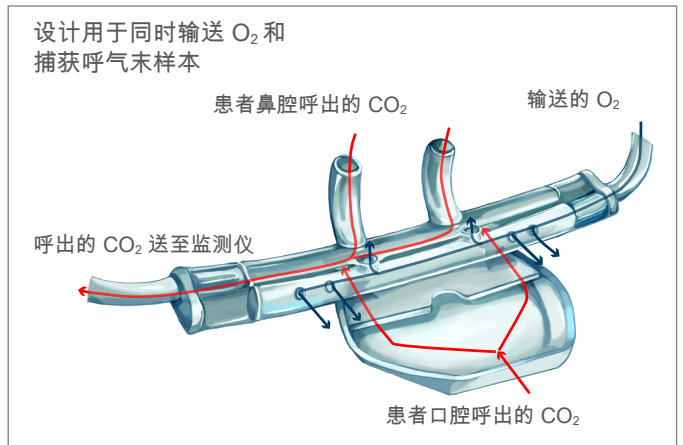

产品	描述	长度	PK
5707F-SE	成人 EtCO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> 口/鼻用套管	7'	25
5710F-SE	成人 EtCO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> 口/鼻用套管	10'	25
5714F-SE	成人 EtCO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> 口/鼻用套管	14'	25