



T-PIECE-SAUERSTOFFAPPARAT MIT POP-OFF

LATEXFREI | EINMALNUTZUNG | WEGWERFARTIKEL

Der SafeT™ T-Piece-Sauerstoffapparat ist die sichere Lösung für Neugeborenenreanimation und CPAP. Die Abgabe eines durchgehenden Sauerstoffflusses bei konstantem PIP und PEEP ermöglicht es dem Anwender, die für die Reanimation notwendige Beatmung sicherzustellen. SafeT beugt dabei dem Aufbau eines Überdrucks vor, der sonst bei Neugeborenen zu Barotrauma und Pneumothorax führen kann.

Integrierter, farbcodierter Druckmesser für effektive Überwachung des Beatmungsdrucks




Mit dem PEEP-Einstellrad kann der Anwender den PEEP bestimmen, während der Beatmung wird das Loch des PEEP-Einstellrads entsprechend der eingestellten Atemfrequenz immer wieder abgedeckt, um das Ein- und Ausatmen zu ermöglichen

Verschieden Maskengrößen erhältlich, je nach Patienten- und Krankenhausbedarf

Sauerstoffschlauch mit rotem Universalanschluss

safeT™ T-PIECE-SAUERSTOFFAPPARAT


- So kann der Anwender einen konstanten PIP und PEEP sicherstellen
- Ein konstanter PIP und PEEP bedeuten mehr Sicherheit bei der Beatmung von empfindlichen Babylungen, insbesondere bei Notfällen
- Der integrierte Druckmesser bietet eine klare Sicht auf die Druckbereiche des Beatmungsgeräts
- Das Überdruckventil verhindert den Aufbau eines Überdrucks in der Lunge
- Kann für CPAP eingesetzt werden
- Inklusive einer gepolsterten Gesichtsmaske für sichere Abdichtung der Maske während der Beatmung
- Leicht lesbare Kontrollen und Druckmesser erlauben einen leichten, schnellen Aufbau
- Mit dem roten Universalanschluss für den O₂-Schlauch lässt sich der korrekte Sitz des Sauerstoffanschlusses schnell prüfen

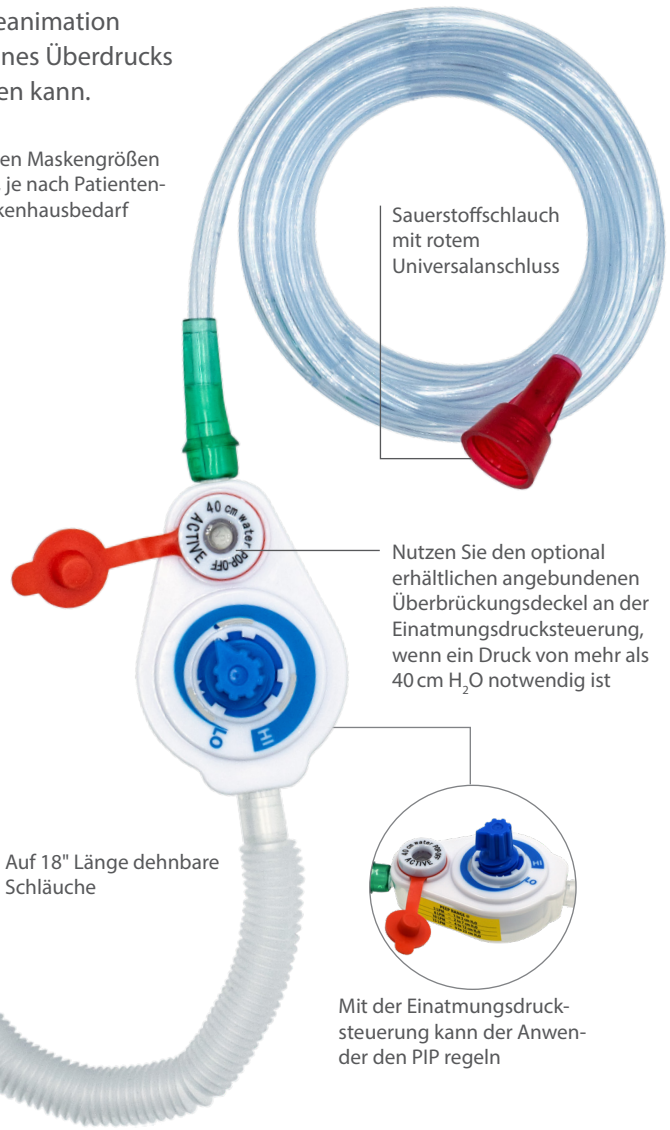

Auf 18" Länge dehnbare Schläuche

Nutzen Sie den optional erhältlichen angebrachten Überbrückungsdeckel an der Einatemungsdrucksteuerung, wenn ein Druck von mehr als 40 cm H₂O notwendig ist

Mit der Einatemungsdrucksteuerung kann der Anwender den PIP regeln

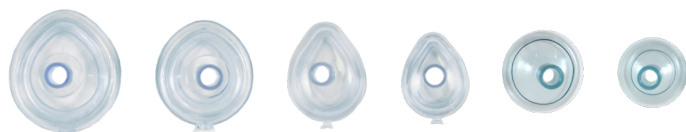

Kleinkind Klein Kleinkind Klein Neugeborene Extraklein Neugeborene Kleinkind - rund Weiche Dichtung Neugeborene - rund Weiche Dichtung

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MASKE	PK
ST710	SafeT mit Pop-Off	Extraklein, Neugeborene	10
ST711	SafeT mit Pop-Off	Klein, Neugeborene	10
ST712	SafeT mit Pop-Off	Klein, Kleinkind	10
ST713	SafeT mit Pop-Off	Kleinkind	10
ST714	SafeT mit Pop-Off	Neugeborene - rund	10
ST715	SafeT mit Pop-Off	Kleinkind - rund	10
ST717	SafeT mit Pop-Off	Keine Maske	10