

safeT™

T-PIECE GJENOPPLIVNINGSSAPPARAT MED POP-OFF

UTEN LATEKS | FOR ÉN PASIENT | TIL ENGANGSBRUK

SafeT™ T-Piece gjenopplivningsapparat er den sikre løsningen for gjenopplivning av nyfødte og CPAP. Ved å levere kontinuerlig oksygenstrøm samtidig med konsistente PIP- og PEEP-trykk lar den klinikere gi nødvendig ventilasjonsstøtte ved gjenopplivning. SafeT hjelper med å forhindre overtrykk som kan føre til barotraumer og pneumothorax.

Integrert, fargekodet trykkmanometer for effektiv overvåking av ventilasjonstrykk



PEEP-knappen lar klinikeren stille PEEP: ventilering forsynes ved å okkludere PEEP-knapphullet med jevne mellomrom med den ønskede respirasjonsfrekvensen og muliggjør dermed inn- og utpust

Et utvalg av maskestørrelser for å fylle pasientens og sykehusets behov

Oksygenlange med rød universalkobling som passer til alle


Bruk en valgfri festet overstyringstropp på kontrollen for inspirasjonstrykk når du trenger trykk på mer enn 40 cm H₂O

Utvidbar krets som utvides til en lengde på inntil 18 tommer (45,7 cm).

Kontrollen for inspirasjonstrykk lar klinikeren stille PIP

safeT™ T-PIECE GJENOPPLIVNINGSSAPPARAT

- Lar klinikeren gi konsistente PIP- og PEEP-trykk
- Konsistent PIP og PEEP sørger for bedre sikkerhet ved ventilering av babyenes følsomme lunger, spesielt i en nødsituasjon
- Det integrerte trykkmanometeret gir tydelig visualisering av grenseverdiene for ventilasjonstrykket
- Trykkbegrensningsventilen hjelper med å forhindre overtrykk i lungene
- Kan gi CPAP
- Inkluderer en ansiktsmaske med pute for å gi tilstrekkelig forsegling under ventilering med maske
- Lettlest kontroll og manometer gjør oppsettet raskt og enkelt
- Universell rød O₂-tilkobling som passer til alle muliggjør umiddelbar visualisering av riktig oksygentilkobling

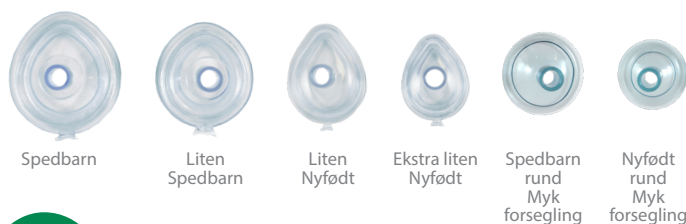

Spedbarn

Liten Spedbarn

Liten Nyfødt

Ekstra liten Nyfødt

Spedbarn rund Myk forsegling

Nyfødt rund Myk forsegling

ARTIKKEL	BESKRIVELSE	MASKE	PK
ST710	SafeT m/ Pop-Off	Ekstra Liten Nyfødt	10
ST711	SafeT m/ Pop-Off	Liten Nyfødt	10
ST712	SafeT m/ Pop-Off	Liten Spedbarn	10
ST713	SafeT m/ Pop-Off	Spedbarn	10
ST714	SafeT m/ Pop-Off	Nyfødt Rund	10
ST715	SafeT m/ Pop-Off	Spedbarn Rund	10
ST717	SafeT m/ Pop-Off	Ingen Maske	10