

# REANIMADOR CON PIEZA EN T SAFET™ CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN

SIN LÁTEX | PARA USO EN UN SOLO PACIENTE | DESECHABLE

El reanimador con pieza en T SafeT™ es la solución segura para la reanimación neonatal y para CPAP. La administración de un flujo continuo de oxígeno con presiones constantes de PIP y PEEP permite a los médicos brindar el apoyo ventilatorio necesario durante la reanimación. SafeT ayuda a prevenir la sobrepresurización que puede provocar barotrauma y neumotórax en los recién nacidos.

Manómetro integrado y codificado por colores para un monitoreo eficaz de las presiones ventilatorias



El dial de PEEP permite al médico configurar la PEEP; la ventilación se administra ocluyendo el orificio del dial de PEEP de manera intermitente a la frecuencia respiratoria deseada, lo que permite que se produzca la inspiración y la exhalación.

Variedad de tamaños de mascarilla disponibles para satisfacer las necesidades del paciente y del hospital

Tubo de oxígeno con conector universal rojo


Utilice el tapón de anulación incorporado opcional en el controlador de presión inspiratoria cuando se necesiten presiones superiores a 40 cm H<sub>2</sub>O.

## REANIMADOR CON PIEZA EN T SAFET™

- Permite al médico administrar PIP y PEEP constantes, lo que ayuda a garantizar una mayor seguridad al ventilar los pulmones frágiles de los bebés, especialmente en una situación de emergencia.
- El manómetro integrado permite visualizar claramente los rangos de presión ventilatoria.
- La válvula de liberación de presión ayuda a prevenir la sobrepresurización de los pulmones.
- Es apto para CPAP.
- Está disponible con una mascarilla acolchada para un sellado adecuado durante la ventilación con mascarilla.
- El controlador y el manómetro son fáciles de leer y hacen que la configuración sea sencilla y rápida.
- El conector universal rojo para O<sub>2</sub> permite visualizar de inmediato la conexión correcta al oxígeno.

Circuito expansible hasta 45 cm (18 pulgadas) de longitud

El controlador de presión inspiratoria permite al médico configurar la PIP

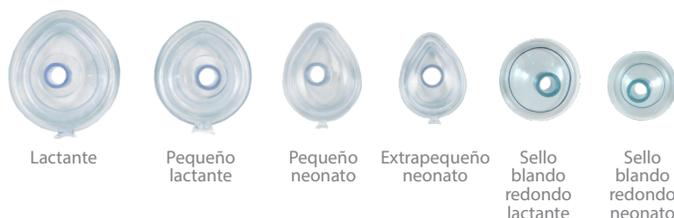

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	MASCARILLA	UNIDADES
ST710	SafeT c/liberación de presión	Extrapequeño neonato	10
ST711	SafeT c/liberación de presión	Pequeño neonato	10
ST712	SafeT c/liberación de presión	Pequeño lactante	10
ST713	SafeT c/liberación de presión	Lactante	10
ST714	SafeT c/liberación de presión	Redondo neonato	10
ST715	SafeT c/liberación de presión	Redondo lactante	10
ST717	SafeT c/liberación de presión	Sin mascarilla	10