

# TAGLIE NEONATALI AIR-Q®3



Air-Q®3 è ora disponibile con la più piccola via aerea sopraglottica per i pazienti neonati estremamente fragili. Le nuove taglie 0 e 0,5 sono disponibili in tutti e quattro gli stili di Air-Q3. L'opzione auto-pressurizzante consente l'inserimento e la ventilazione senza ulteriori passaggi, mentre la versione con accesso gastrico aiuta a gestire le secrezioni e l'aria nello stomaco.



## VIA AEREA SOPRAGLOTTICA AIR-Q®3

- Connettore con codice colore per una facile identificazione delle dimensioni. Il connettore rimovibile collegato consente l'inserimento del tubo endotracheale attraverso il tubo di ventilazione.
- Tubo di ventilazione in silicone di grado medico, con curvatura anatomica e blocco del morso integrato.
- L'esclusivo sollevatore dell'epiglottide consente di alzare l'epiglottide per ottimizzare il posizionamento della cuffia.
- Il gonfiaggio della cuffia auto-pressurizzante è controllato dalla pressione inspiratoria/ espiratoria. Non è necessario alcun gonfiaggio manuale.\*

\*Solo per i prodotti Air-Qsp3 e Air-Qsp3G.

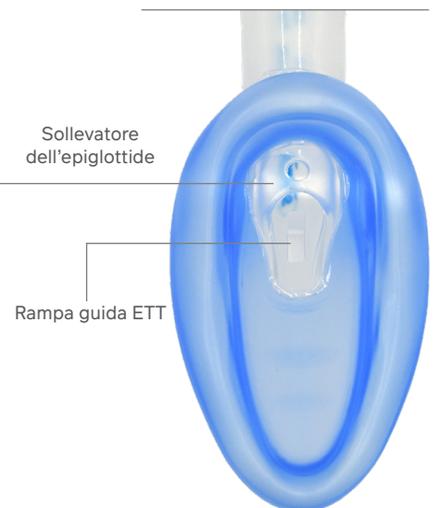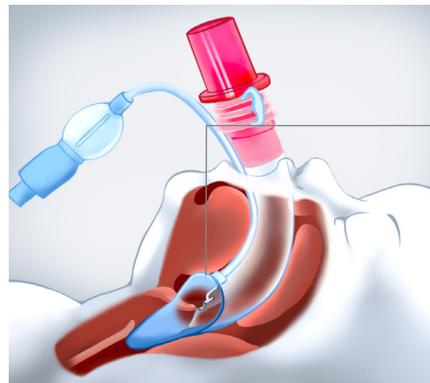

## QUATTRO MODELLI PER DIVERSE ESIGENZE DI INTUBAZIONE:

- Air-Q®3 – fornisce una notevole facilità di posizionamento dell'ETT quando è necessaria un'intubazione imprevista.
- Air-Qsp3 – dispone di una cuffia auto-pressurizzante che utilizza una fonte di ventilazione a pressione positiva. Gonfiaggio automatico alla pressione ottimizzata e specifica per il paziente per garantire la tenuta.
- Air-Q3G – dispone di un accesso extra ampio all'ingresso gastrico e di due canali gastrici in grado di accogliere tubi OG fino a 6 Fr.
- Air-Qsp3G – dispone di un accesso extra ampio all'ingresso gastrico e di due canali gastrici in grado di accogliere tubi OG fino a 6 Fr. Include anche una cuffia auto-pressurizzante che utilizza una fonte di ventilazione a pressione positiva.



## VIA AEREA SOPRAGLOTTICA NEONATALE AIR-Q®3 CON CONNETTORE DA 15 MM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	PESO CORPOREO IDEALE	OETT MASSIMO	APERTURA DELLA BOCCA	LUNGHEZZA DEL TUBO	TUBO OG MASSIMO	VOLUME DI GONFIAGGIO
30005	Air-Q3	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,0 cm	-	0-0,5 mL
30055	Air-Q3	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7,0 cm	-	0-0,5 mL
40005	Air-Qsp3	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,0 cm	-	-
40055	Air-Qsp3	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7,0 cm	-	-
50005	Air-Q3G	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,0 cm	5 Fr	0-0,5 mL
50055	Air-Q3G	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7,0 cm	6 Fr	0-0,5 mL
60005	Air-Qsp3G	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,0 cm	5 Fr	-
60055	Air-Qsp3G	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7,0 cm	6 Fr	-