

AIR-Q[®]3

VÍA AÉREA SUPRAGLÓTICA



Vía aérea supraglótica (SGA) Air-Q®3

El dispositivo avanzado Air-Q®3 de silicona ayuda a proporcionar seguridad y confianza en el manejo de la vía aérea, independientemente de los retos a los que se enfrente. La exclusiva rampa del tubo ET y el elevador de epiglottis ayudan a realizar intubaciones rápidas, sencillas y seguras.



AIR-Q®3

Ofrece una facilidad excepcional de colocación del tubo ET cuando se requiere una intubación inesperada.



AIR-Q®3G

Incorpora una entrada gástrica ancha adicional que admite tubos orogástricos (OG) de hasta 18 Fr y dos canales gástricos.



AIR-Q®SP3

Utiliza ventilación de presión positiva para presurizar el manguito. Las presiones del manguito alternan entre la presión máxima de la vía aérea y los niveles de PEEP.




AIR-Q®SP3G

Utiliza ventilación de presión positiva para presurizar el manguito. Las presiones del manguito alternan entre la presión máxima de la vía aérea y los niveles de PEEP. Incorpora un manguito autopresurizable con una entrada gástrica ancha adicional que admite tubos OG de hasta 18 Fr y dos canales gástricos.

Colocación perfecta más sencilla



La vía aérea supraglótica Air-Q®3 proporciona:

- Colocación anatómicamente correcta de la vía aérea con máscara
- Elevación de la epiglotis para maximizar el acceso
- Rampa guía para facilitar la inserción y colocación del tubo ET

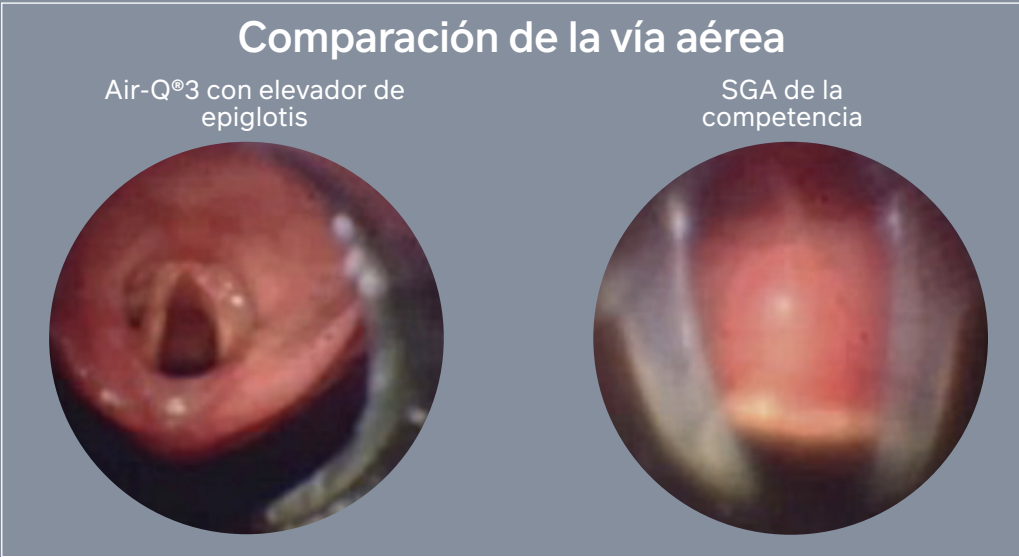

ELEVADOR DE EPIGLOTIS

Nuestra exclusiva vía aérea supraglótica incluye un elevador de epiglotis y un talón elevado para optimizar la colocación y el sellado de la vía aérea.

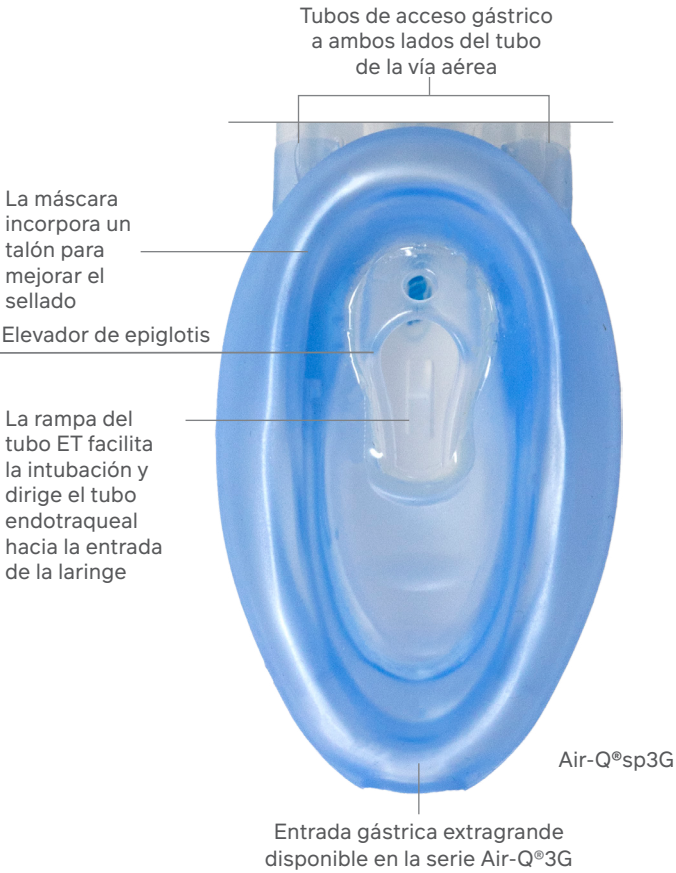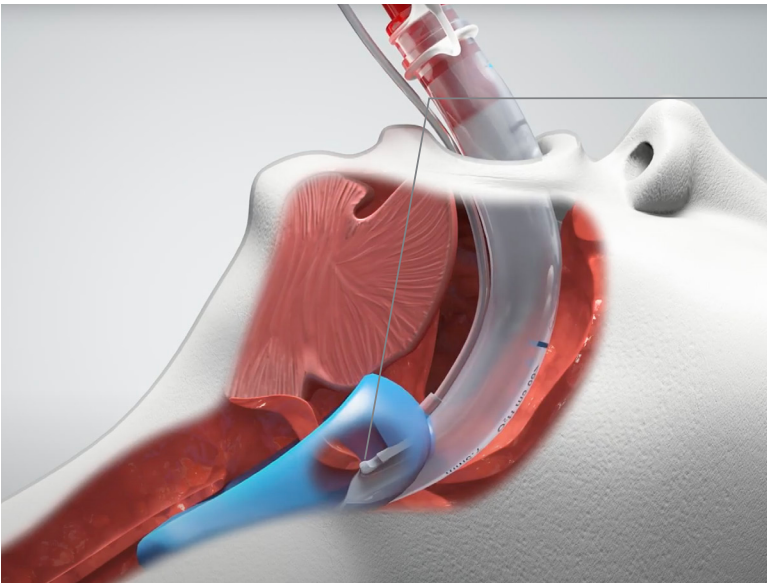

ESTILETES DE EXTRACCIÓN DESECHABLES

ARTÍCULO	TAMAÑO DEL ESTILETE	TAMAÑO DEL AIR-Q3	OETT MÁX.	PESO	PAQ.
10-1006	00	0-1,5	4,5 mm	4-17 kg	10
10-1005	0	2 - 3	6,0 mm	17-60 kg	10
10-1004	1	4 - 5	9,0 mm	>60 kg	10



VÍA AÉREA SUPRAGLÓTICA Air-Q®3 CON CONECTOR DE 15 MM

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PESO CORPORAL IDEAL	OETT MÁX.	APERTURA DE LA BOCA	LONGITUD DEL TUBO	TUBO OG MÁXIMO	VOLUMEN DE INFLADO
30005	Air-Q3	0	<2 kg	3,0 mm	5 mm	6 cm	—	0-0,5 ml
30055	Air-Q3	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7 cm	—	0-0,5 ml
30105	Air-Q3	1	4-7 kg	4,5 mm	11 mm	9 cm	—	0,5-1 ml
30155	Air-Q3	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14 mm	11 cm	—	1 ml
30205	Air-Q3	2	17-30 kg	5,5 mm	17 mm	14 cm	—	1-2 ml
30305	Air-Q3	3	30-60 kg	7,0 mm	20 mm	16 cm	—	2-3 ml
30405	Air-Q3	4	60-80 kg	8,0 mm	23 mm	18 cm	—	3-4 ml
30505	Air-Q3	5	>80 kg	9,0 mm	25 mm	20 cm	—	4-5 ml
50005	Air-Q3G	0	<2 kg	3,0 mm	5 mm	6 cm	5 Fr	0-0,5 ml
50055	Air-Q3G	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7 cm	6 Fr	0-0,5 ml
50105	Air-Q3G	1	4-7 kg	4,5 mm	11 mm	9 cm	8 Fr	0,5-1 ml
50155	Air-Q3G	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14 mm	11 cm	8 Fr	1 ml
50205	Air-Q3G	2	17-30 kg	5,5 mm	17 mm	14 cm	10 Fr	1-2 ml
50305	Air-Q3G	3	30-60 kg	7,0 mm	20 mm	16 cm	14 Fr	2-3 ml
50405	Air-Q3G	4	60-80 kg	8,0 mm	23 mm	18 cm	16 Fr	3-4 ml
50505	Air-Q3G	5	>80 kg	9,0 mm	25 mm	20 cm	18 Fr	4-5 ml
40005	Air-Qsp3	0	<2 kg	3,0 mm	5 mm	6 cm	—	—
40055	Air-Qsp3	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7 cm	—	—
40105	Air-Qsp3	1	4-7 kg	4,5 mm	11 mm	9 cm	—	—
40155	Air-Qsp3	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14 mm	11 cm	—	—
40205	Air-Qsp3	2	17-30 kg	5,5 mm	17 mm	14 cm	—	—
40305	Air-Qsp3	3	30-60 kg	7,0 mm	20 mm	16 cm	—	—
40405	Air-Qsp3	4	60-80 kg	8,0 mm	23 mm	18 cm	—	—
40505	Air-Qsp3	5	>80 kg	9,0 mm	25 mm	20 cm	—	—
60005	Air-Qsp3G	0	<2 kg	3,0 mm	5 mm	6 cm	5 Fr	—
60055	Air-Qsp3G	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7 cm	6 Fr	—
60105	Air-Qsp3G	1	4-7 kg	4,5 mm	11 mm	9 cm	8 Fr	—
60155	Air-Qsp3G	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14 mm	11 cm	8 Fr	—
60205	Air-Qsp3G	2	17-30 kg	5,5 mm	17 mm	14 cm	10 Fr	—
60305	Air-Qsp3G	3	30-60 kg	7,0 mm	20 mm	16 cm	14 Fr	—
60405	Air-Qsp3G	4	60-80 kg	8,0 mm	23 mm	18 cm	16 Fr	—
60505	Air-Qsp3G	5	>80 kg	9,0 mm	25 mm	20 cm	18 Fr	—