

AIR-Q[®]3 SUPRAGLOTTİK HAVAYOLU



AIR-Q®3 SUPRAGLOTTİK HAVAYOLU

Gelişmiş, silikon Air-Q®3, hangi havayolu zorluklarıyla karşılaşırsanız karşılaştığınız havayolu yönetiminde emniyet ve güven sunmaya yardımcı olur. Benzersiz ET tüpü rampası ve epiglottis kaldırıcı, hızlı, kolay ve güvenli entübasyon işlemlerine yardımcı olur.



AIR-Q®3

Beklenmeyen bir tüp geçirme işlemi gerekli olduğunda ETT yerleştirmede olağanüstü kolaylık sağlar.



AIR-Q®3G

Maksimum 18 Fr NG tüpleri ve iki gastrik kanal barındıran çok geniş bir gastrik giriş özelliğine sahiptir.



AIR-Q®SP3

Manşona kendiliğinden basınç sağlamak için pozitif basınçlı havalandırma kullanır. Manşon en yüksek hava kanalı basıncı ile PEEP seviyeleri arasındaki döngüye basınç uygular.



AIR-Q®SP3G

Manşona kendiliğinden basınç sağlamak için pozitif basınçlı havalandırma kullanır. Manşon en yüksek hava kanalı basıncı ile PEEP seviyeleri arasındaki döngüye basınç uygular. Maksimum 18 Fr NG tüpleri ve iki gastrik kanal barındıran çok geniş bir gastrik giriş ile kendiliğinden basınçlı bir manşon özelliğine sahiptir.


MÜKEMMEL YERLEŞTİRME KOLAYLAŞTIRILDI

AIR-Q®3 SGA HAVAYOLU ŞUNLARI SAĞLAR:


- Maskeli havayolunun anatomik olarak doğru yerleştirilmesi
- Epiglotisin maksimum erişim sağlayacak şekilde kaldırılması
- ETT takmaya ve yerleştirmeye yardımcı olacak kılavuz rampa

Havayolu Karşılaştırması

EPIGLOTİS KALDIRICILI
AIR-Q®3

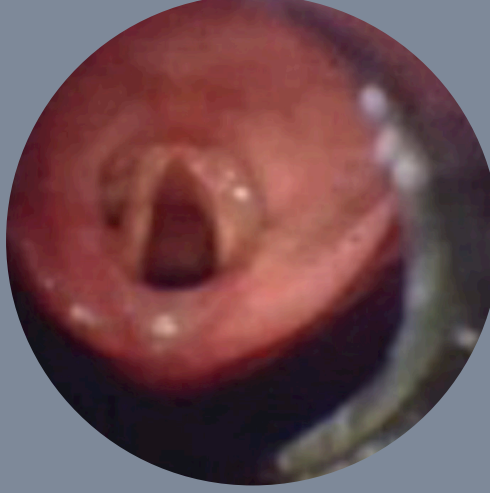


REKABETÇİ İLA

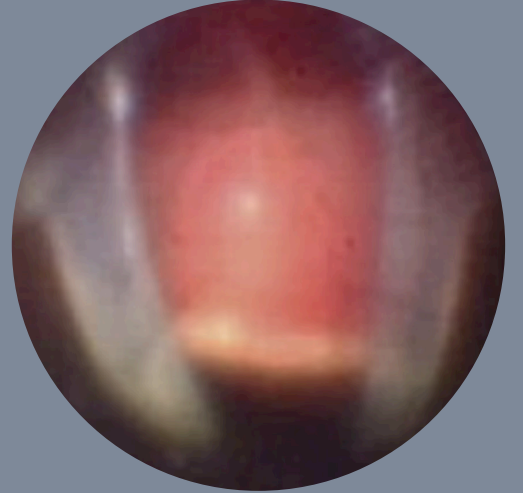

EPIGLOTİS KALDIRICI

Benzersiz supraglottik havayolumuz, sızdırmazlığı ve havayolu yerleşimini optimize edecek bir epiglottis kaldırıcı ve yükseltilmiş topuk içerir.

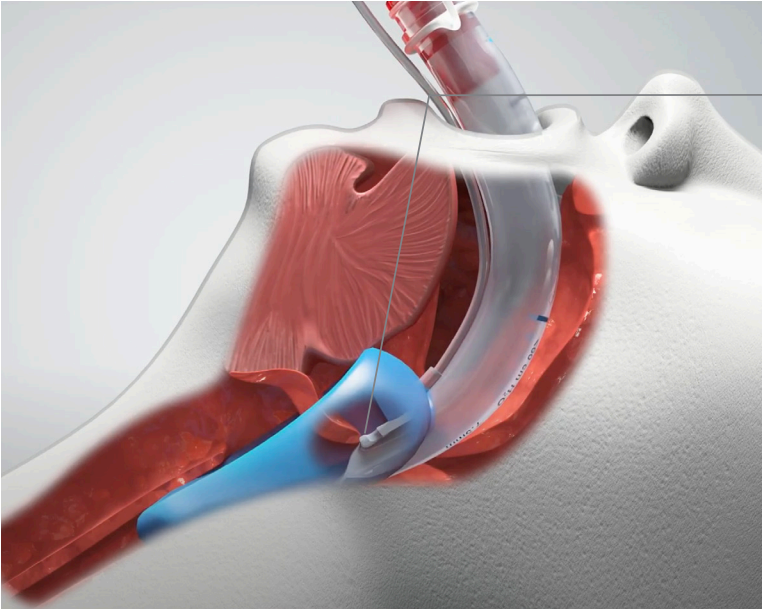

Gelişmiş sızdırmazlık için güçlendirilmiş maske topuğu

Epiglottis Kaldırıcı

ET tüp rampası tüp geçirmeyi kolaylaştırır ve endotrakeal tüpü laringeal girişe doğru yönlendirir

Havayolu tüpünün her iki tarafında gastrik erişim tüpleri



Air-Q®sp3G

Air-Q®3G serisinde çok büyük gastrik giriş mevcuttur



15 MM KONEKTÖRLÜ AIR-Q®3 SUPRAGLOTTİK HAVAYOLU

ÜRÜN	AÇIKLAMA	BOYUT	İDEAL VÜCUT AĞIRLIĞI	MAKSİMUM OETT	AĞIZ AÇIKLIĞI	TÜP UZUNLUĞU	MAKSİMUM OG TÜPÜ	ŞİŞİRME HACMİ
30005	Air-Q3	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,0 cm	—	0-0,5 ml
30055	Air-Q3	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7,0 cm	—	0-0,5 ml
30105	Air-Q3	1,0	4-7 kg	4,5 mm	11,0 mm	9,0 cm	—	0,5-1,0 ml
30155	Air-Q3	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14,0 mm	11,0 cm	—	1,0 ml
30205	Air-Q3	2	17-30 kg	5,5 mm	17,0 mm	14,0 cm	—	1,0-2,0 ml
30305	Air-Q3	3	30-60 kg	7,0 mm	20,0 mm	16,0 cm	—	2,0-3,0 ml
30405	Air-Q3	4	60-80 kg	8,0 mm	23,0 mm	18,0 cm	—	3,0-4,0 ml
30505	Air-Q3	5	> 80 kg	9,0 mm	25,0 mm	20,0 cm	—	4,0-5,0 ml
50005	Air-Q3G	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,0 cm	6 Fr	0-0,5 ml
50055	Air-Q3G	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7,0 cm	6 Fr	0-0,5 ml
50105	Air-Q3G	1,0	4-7 kg	4,5 mm	11,0 mm	9,0 cm	8 Fr	0,5-1,0 ml
50155	Air-Q3G	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14,0 mm	11,0 cm	10 Fr	1,0 ml
50205	Air-Q3G	2	17-30 kg	5,5 mm	17,0 mm	14,0 cm	12 Fr	1,0-2,0 ml
50305	Air-Q3G	3	30-60 kg	7,0 mm	20,0 mm	16,0 cm	16 Fr	2,0-3,0 ml
50405	Air-Q3G	4	60-80 kg	8,0 mm	23,0 mm	18,0 cm	18 Fr	3,0-4,0 ml
50505	Air-Q3G	5	> 80 kg	9,0 mm	25,0 mm	20,0 cm	18 Fr	4,0-5,0 ml
40005	Air-Qsp3	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,0 cm	—	—
40055	Air-Qsp3	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7,0 cm	—	—
40105	Air-Qsp3	1,0	4-7 kg	4,5 mm	11,0 mm	9,0 cm	—	—
40155	Air-Qsp3	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14,0 mm	11,0 cm	—	—
40205	Air-Qsp3	2	17-30 kg	5,5 mm	17,0 mm	14,0 cm	—	—
40305	Air-Qsp3	3	30-60 kg	7,0 mm	20,0 mm	16,0 cm	—	—
40405	Air-Qsp3	4	60-80 kg	8,0 mm	23,0 mm	18,0 cm	—	—
40505	Air-Qsp3	5	> 80 kg	9,0 mm	25,0 mm	20,0 cm	—	—
60005	Air-Qsp3G	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,0 cm	6 Fr	—
60055	Air-Qsp3G	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7,0 cm	6 Fr	—
60105	Air-Qsp3G	1,0	4-7 kg	4,5 mm	11,0 mm	9,0 cm	8 Fr	—
60155	Air-Qsp3G	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14,0 mm	11,0 cm	10 Fr	—
60205	Air-Qsp3G	2	17-30 kg	5,5 mm	17,0 mm	14,0 cm	12 Fr	—
60305	Air-Qsp3G	3	30-60 kg	7,0 mm	20,0 mm	16,0 cm	16 Fr	—
60405	Air-Qsp3G	4	60-80 kg	8,0 mm	23,0 mm	18,0 cm	18 Fr	—
60505	Air-Qsp3G	5	> 80 kg	9,0 mm	25,0 mm	20,0 cm	18 Fr	—