

AIR-Q[®]3

VÍA AÉREA SUPRAGLÓTICA



Vía aérea supraglótica (SGA) Air-Q®3

El dispositivo avanzado Air-Q®3 de silicona ayuda a proporcionar seguridad y confianza en el manejo de la vía aérea, independientemente de los retos a los que se enfrente. La exclusiva rampa del tubo ET y el elevador de epiglotis ayudan a realizar intubaciones rápidas, sencillas y seguras.



AIR-Q®3

Ofrece una facilidad excepcional de colocación del tubo ET cuando se requiere una intubación inesperada.



AIR-Q®3G

Incorpora una entrada gástrica ancha adicional que admite tubos orogástricos (OG) de hasta 18 Fr y dos canales gástricos.



AIR-Q®SP3

Utiliza ventilación de presión positiva para presurizar el manguito. Las presiones del manguito alternan entre la presión máxima de la vía aérea y los niveles de PEEP.




AIR-Q®SP3G

Utiliza ventilación de presión positiva para presurizar el manguito. Las presiones del manguito alternan entre la presión máxima de la vía aérea y los niveles de PEEP. Incorpora un manguito autopresurizable con una entrada gástrica ancha adicional que admite tubos OG de hasta 18 Fr y dos canales gástricos.

Colocación perfecta más sencilla


La vía aérea supraglótica Air-Q®3 proporciona:

- Colocación anatómicamente correcta de la vía aérea con máscara
- Elevación de la epiglotis para maximizar el acceso
- Rampa guía para facilitar la inserción y colocación del tubo ET

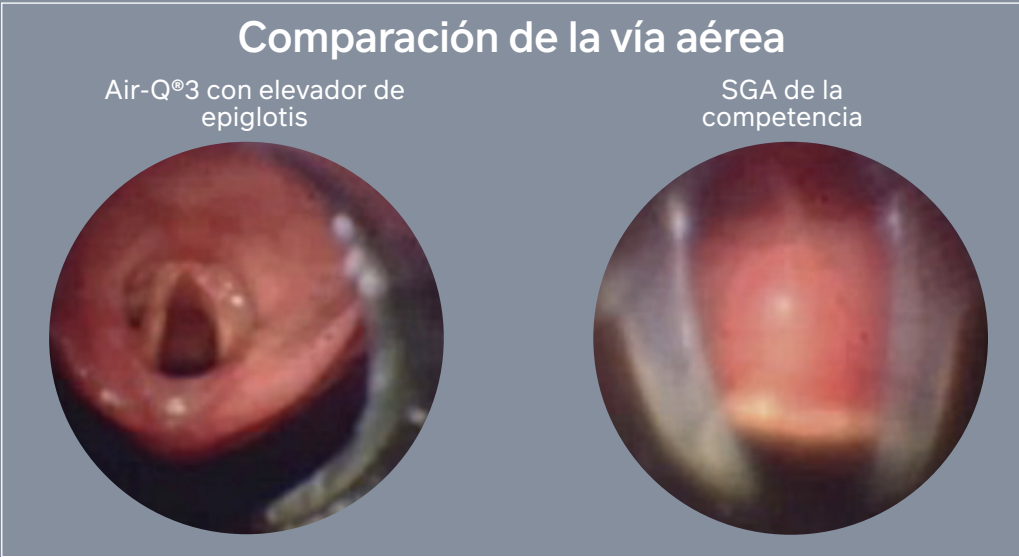

ELEVADOR DE EPIGLOTIS


Nuestra exclusiva vía aérea supraglótica incluye un elevador de epiglotis y un talón elevado para optimizar la colocación y el sellado de la vía aérea.

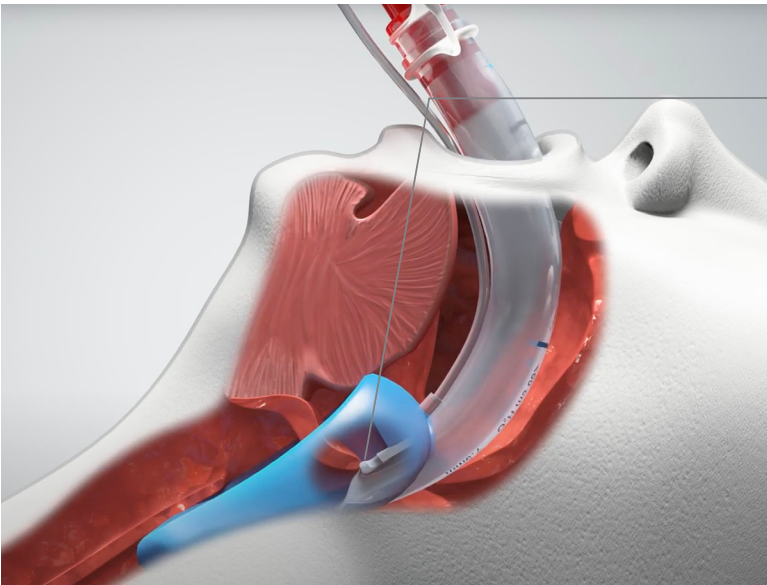

La máscara incorpora un talón para mejorar el sellado

Elevador de epiglotis

La rampa del tubo ET facilita la intubación y dirige el tubo endotraqueal hacia la entrada de la laringe

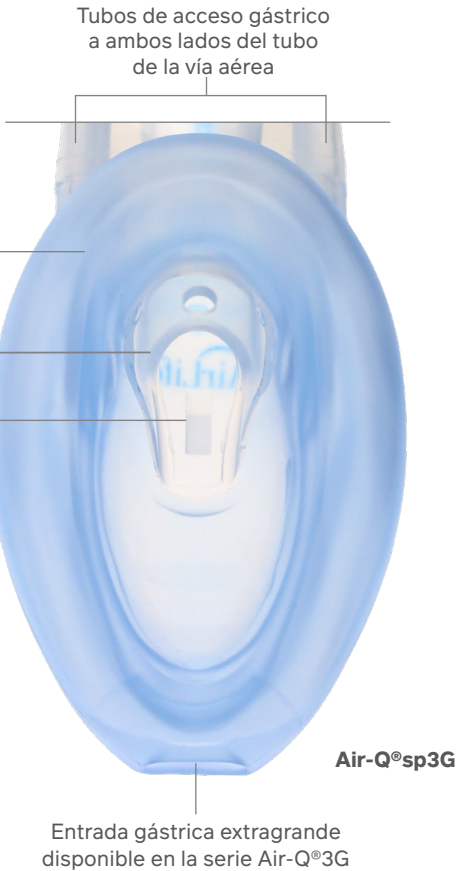

ESTILETES DE EXTRACCIÓN DESECHABLES

ARTÍCULO	TAMAÑO DEL ESTILETE	TAMAÑO DEL AIR-Q3	OETT MÁX.	PESO	PAQ.
10-1006	00	0-1,5	4,5 mm	0-17 kg	10
10-1005	0	2 - 3	6,0 mm	17-60 kg	10
10-1004	1	4 - 5	9,0 mm	>60 kg	10



VÍA AÉREA SUPRAGLÓTICA Air-Q®3 CON CONECTOR DE 15 MM

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PESO CORPORAL IDEAL	OETT MÁX.	APERTURA DE LA BOCA	LONGITUD DEL TUBO	TUBO OG MÁXIMO	VOLUMEN DE INFLADO
30005	Air-Q3	0	<2 kg	3,0 mm	5 mm	6.43 cm	—	4 ml
30055	Air-Q3	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7.69 cm	—	7 ml
30105	Air-Q3	1	4-7 kg	4,5 mm	11 mm	8.88 cm	—	10 ml
30155	Air-Q3	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14 mm	10.5 cm	—	14 ml
30205	Air-Q3	2	17-30 kg	5,5 mm	17 mm	11.62 cm	—	20 ml
30305	Air-Q3	3	30-60 kg	7,0 mm	20 mm	13.08 cm	—	30 ml
30405	Air-Q3	4	60-80 kg	8,0 mm	23 mm	15 cm	—	40 ml
30505	Air-Q3	5	>80 kg	9,0 mm	25 mm	16.5 cm	—	50 ml
50005	Air-Q3G	0	<2 kg	3,0 mm	5 mm	6.67 cm	5 Fr	4 ml
50055	Air-Q3G	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7.81 cm	6 Fr	7 ml
50105	Air-Q3G	1	4-7 kg	4,5 mm	11 mm	9.16 cm	8 Fr	10 ml
50155	Air-Q3G	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14 mm	10.98 cm	8 Fr	14 ml
50205	Air-Q3G	2	17-30 kg	5,5 mm	17 mm	11.52 cm	10 Fr	20 ml
50305	Air-Q3G	3	30-60 kg	7,0 mm	20 mm	14.36 cm	14 Fr	30 ml
50405	Air-Q3G	4	60-80 kg	8,0 mm	23 mm	15.37 cm	16 Fr	40 ml
50505	Air-Q3G	5	>80 kg	9,0 mm	25 mm	17.75 cm	18 Fr	50 ml
40005	Air-Qsp3	0	<2 kg	3,0 mm	5 mm	6.29 cm	—	—
40055	Air-Qsp3	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7.78 cm	—	—
40105	Air-Qsp3	1	4-7 kg	4,5 mm	11 mm	9.02 cm	—	—
40155	Air-Qsp3	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14 mm	~10.5 cm	—	—
40205	Air-Qsp3	2	17-30 kg	5,5 mm	17 mm	11.63 cm	—	—
40305	Air-Qsp3	3	30-60 kg	7,0 mm	20 mm	13.04 cm	—	—
40405	Air-Qsp3	4	60-80 kg	8,0 mm	23 mm	14.99 cm	—	—
40505	Air-Qsp3	5	>80 kg	9,0 mm	25 mm	16.5 cm	—	—
60005	Air-Qsp3G	0	<2 kg	3,0 mm	5 mm	6.86 cm	5 Fr	—
60055	Air-Qsp3G	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	8.05 cm	6 Fr	—
60105	Air-Qsp3G	1	4-7 kg	4,5 mm	11 mm	9.29 cm	8 Fr	—
60155	Air-Qsp3G	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14 mm	10.9 cm	8 Fr	—
60205	Air-Qsp3G	2	17-30 kg	5,5 mm	17 mm	11.61 cm	10 Fr	—
60305	Air-Qsp3G	3	30-60 kg	7,0 mm	20 mm	14.25 cm	14 Fr	—
60405	Air-Qsp3G	4	60-80 kg	8,0 mm	23 mm	15.37 cm	16 Fr	—
60505	Air-Qsp3G	5	>80 kg	9,0 mm	25 mm	17.75 cm	18 Fr	—