

AIR-Q®3 SUPRAGLOTTISK LUFTVEJ

LATEXFRI | TIL BRUG PÅ EN ENKELT PATIENT | TIL ENGANGSBRUG

Den avancerede Air-Q®3 af silikone bidrager til sikkerheden og giver dig tillid ved håndtering af luftvejsproblemer – uanset hvilke former for luftvejsproblemer, du står overfor. Den enestående ET-slangerampe og epiglottisløfter bidrager til hurtige, nemme og sikre intubationer.

Gastriske adgangskanaler på begge sider af luftvejsslangen

Høj maskekant til forbedret tætning

ET-slangerampen bidrager til at lette intubationen og styrer den endotrakeale slange hen mod det laryngeale indløb

Air-Q®sp3G

Ekstra stort gastrisk indløb fås i Air-Q®3G-serien

Farvekodet tilslutning til nem identifikation af størrelsen. Aftagelig fastgjort tilslutning, der muliggør indføring af en endotrakeal slange igennem luftvejsslangen.

Luftvejsslange med anatomisk bøjning i silikone af medicinsk kvalitet med integreret bideklods

Åbningen muliggør gennemstrømning af luft, hvis indløbet bliver blokeret


Den enestående epiglottisløfter løfter epiglottis for at maksimere manchetplaceringen

Blød manchet i silikone af medicinsk kvalitet

Selvoppumpende manchet, som styres af indåndings-/udåndingstrykket. Manuel oppumpning er ikke påkrævet.*

Air-Q®sp3

AIR-Q®3 GIVER ET BEDRE OVERBLIK

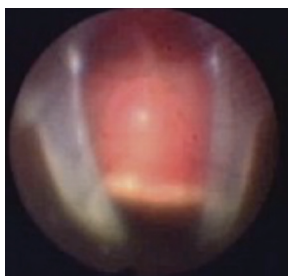

ILA fra konkurrent



Air-Q®3-serien med epiglottisløfter

* Kun Air-Qsp3- og Air-Qsp3G-produkter.



Air-Q*3


Air-Q*sp3

Air-Q*3G

Air-Q*sp3G

FIRE VARIANTER, SOM DÆKKER EN RÆKKE INTUBATIONSBEHOV:

- Air-Q*3 — Sørger for utroligt nem placering af ET-slangen, hvis der uventet bliver behov for intubation.
- Air-Qsp3 — Med selvoppumpende manchet, der anvender en kilde til ventilation med positivt tryk. Oppumpes automatisk til det optimale patientspecifikke tryk for at danne en tætning.
- Air-Q3G — Har en ekstra bred gastrisk indløbsadgang og to gastriske kanaler, hvor der kan tilsluttes OG-slangere på op til 18 Fr.
- Air-Qsp3G — Har en ekstra bred gastrisk indløbsadgang og to gastriske kanaler, hvor der kan tilsluttes OG-slangere på op til 18 Fr. Har også en ekstra bred selvoppumpende manchet, der anvender en kilde til ventilation med positivt tryk.

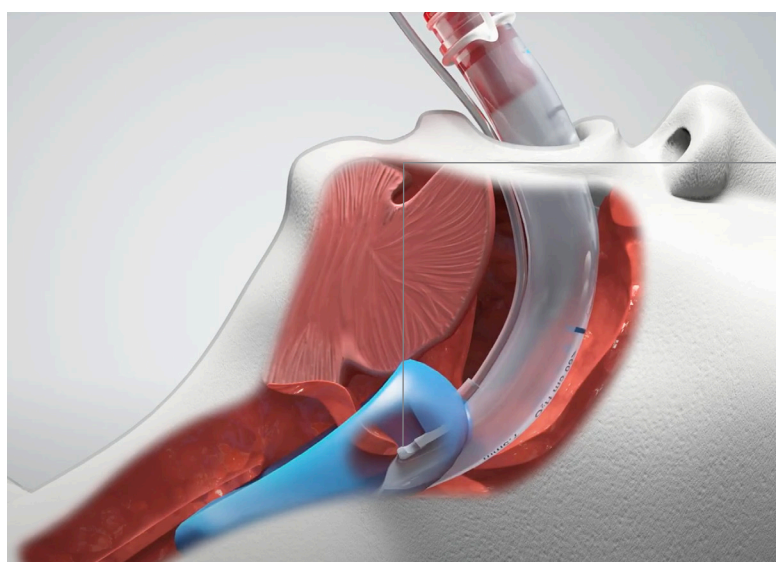


Epiglottisløfter

Styrerampe til ET-slange

Enestående og patenteret epiglottisløfter, som løfter epiglottis på sikker vis for at give adgang til luftvejen i første forsøg.

UDTAGNINGSSTILETTER TIL ENGANGSBRUG

PRODUKT	STØRRELSE	STØRRELSE AIRQ3	MAKSIMAL OETT	KROPSVÆGT	PK
10-1006	00	0 - 1,5	4,5 mm	0 - 17 kg	10
10-1005	0	2 - 3	6,0 mm	17 - 60 kg	10
10-1004	1	4 - 5	9,0 mm	> 60 kg	10

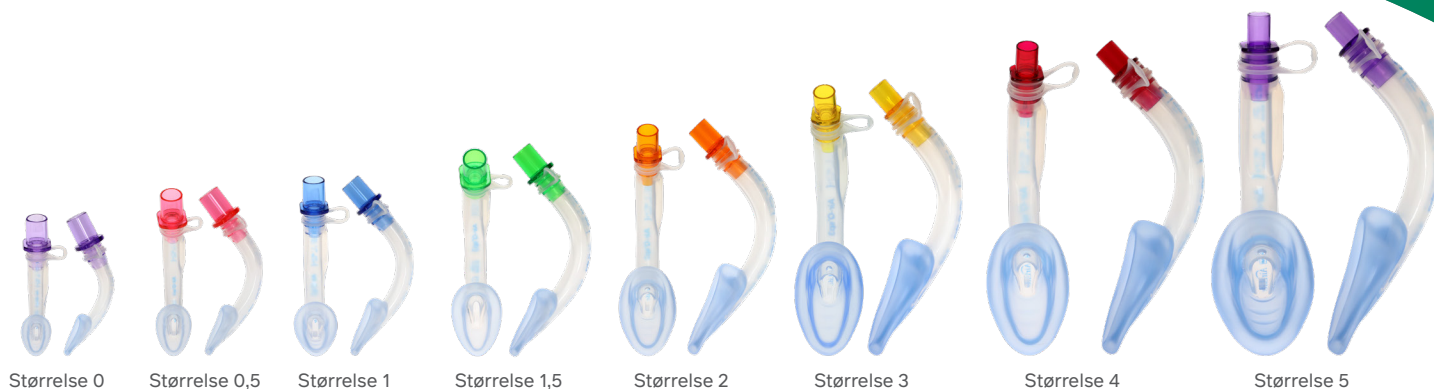

AIR-Q®3 SUPRAGLOTTISK LUFTVEJ MED TILSLUTNING PÅ 15 MM

PRODUKT	BESKRIVELSE	STØR-RELSE	IDEEL KROPSVÆGT	MAKSIMAL OETT	MUNDÅBNING	SLANGENS LÆNGDE	MAKSIMAL OG-SLANGE	OPPUMPINGS-VOLUMEN
30005	Air-Q3	0	< 2 kg	3,0 mm	5 mm	6.43 cm	—	4 mL
30055	Air-Q3	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7.69 cm	—	7 mL
30105	Air-Q3	1	4-7 kg	4,5 mm	11 mm	8.88 cm	—	10 mL
30155	Air-Q3	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14 mm	10.5 cm	—	14 mL
30205	Air-Q3	2	17-30 kg	5,5 mm	17 mm	11.62 cm	—	20 mL
30305	Air-Q3	3	30-60 kg	7,0 mm	20 mm	13.08 cm	—	30 mL
30405	Air-Q3	4	60-80 kg	8,0 mm	23 mm	15 cm	—	40 mL
30505	Air-Q3	5	> 80 kg	9,0 mm	25 mm	16.5 cm	—	50 mL
50005	Air-Q3G	0	< 2 kg	3,0 mm	5 mm	6.67 cm	5 Fr	4 mL
50055	Air-Q3G	0,5	2 - 4 kg	4,0 mm	8 mm	7.81 cm	6 Fr	7 mL
50105	Air-Q3G	1	4-7 kg	4,5 mm	11 mm	9.16 cm	8 Fr	10 mL
50155	Air-Q3G	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14 mm	10.98 cm	8 Fr	14 mL
50205	Air-Q3G	2	17-30 kg	5,5 mm	17 mm	11.52 cm	10 Fr	20 mL
50305	Air-Q3G	3	30-60 kg	7,0 mm	20 mm	14.36 cm	14 Fr	30 mL
50405	Air-Q3G	4	60-80 kg	8,0 mm	23 mm	15.37 cm	16 Fr	40 mL
50505	Air-Q3G	5	> 80 kg	9,0 mm	25 mm	17.75 cm	18 Fr	50 mL
40005	Air-Qsp3	0	< 2 kg	3,0 mm	5 mm	6.29 cm	—	—
40055	Air-Qsp3	0,5	2 - 4 kg	4,0 mm	8 mm	7.78 cm	—	—
40105	Air-Qsp3	1	4-7 kg	4,5 mm	11 mm	9.02 cm	—	—
40155	Air-Qsp3	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14 mm	~10.5 cm	—	—
40205	Air-Qsp3	2	17-30 kg	5,5 mm	17 mm	11.63 cm	—	—
40305	Air-Qsp3	3	30-60 kg	7,0 mm	20 mm	13.04 cm	—	—
40405	Air-Qsp3	4	60-80 kg	8,0 mm	23 mm	14.99 cm	—	—
40505	Air-Qsp3	5	> 80 kg	9,0 mm	25 mm	16.5 cm	—	—
60005	Air-Qsp3G	0	< 2 kg	3,0 mm	5 mm	6.86 cm	5 Fr	—
60055	Air-Qsp3G	0,5	2 - 4 kg	4,0 mm	8 mm	8.05 cm	6 Fr	—
60105	Air-Qsp3G	1	4-7 kg	4,5 mm	11 mm	9.29 cm	8 Fr	—
60155	Air-Qsp3G	1,5	7-17 kg	5,0 mm	14 mm	10.9 cm	8 Fr	—
60205	Air-Qsp3G	2	17-30 kg	5,5 mm	17 mm	11.61 cm	10 Fr	—
60305	Air-Qsp3G	3	30-60 kg	7,0 mm	20 mm	14.25 cm	14 Fr	—
60405	Air-Qsp3G	4	60-80 kg	8,0 mm	23 mm	15.37 cm	16 Fr	—
60505	Air-Qsp3G	5	> 80 kg	9,0 mm	25 mm	17.75 cm	18 Fr	—