

SUPRAGLOTTINEN AIR-Q®3-ILMATIE

LATEKSION | YHDEN POTILAAN KÄYTTÖÖN | KERTAKÄYTTÖINEN

Edistynyt, kokonaan silikonista valmistettu Air-Q®3 takaa turvallisen ja luotettavan hengitystehdinhallinnan, kohtasitpa mitä tahansa haasteita. Ainutlaatuinen ET-putkiramppi ja kurkunkannen nosto auttavat suorittamaan intubaation nopeasti, helposti ja turvallisesti.

Mahalaukkukanavat hengitystieputken molemmilla puolilla

Sisään rakennettu maskikanta parempaa tiivyyttä varten

ET-putkiramppi helpottaa intubaatiota ja suuntaa endotraktaalisen putken kohti kurkunpäättä

Ainutlaatuinen kurkunkannen nostaja nostaa kurkunkantta mansetin sijoittamisen optimoimiseksi

Pehmeä lääketieteellistä laatua oleva silikonimansetti

Itsepaineistuvaa mansetin täyttöä valvotaan sisään-/ uloshengityspaineen avulla. Ei edellytä manuaalista täyttöä.*

Värikoodattu liitin koon nopeaan tunnistukseen. Irrotettava, yhdistetty liitin mahdollistaa endotraktaalisen putken viennin hengitystieputken läpi.

Anatomisesti muotoiltu, lääketieteellistä laatua oleva ja silikonista valmistettu putki, jossa integroitu purentaesto


Aukko mahdollistaa ilman kulun, jos syöttökohta tukkeutuu

Erityisen suuri mahatuloliitin saatavissa Air-Q®3G-sarjassa

Air-Q®sp3G

Air-Q®sp3

AIR-Q®3 PARANTAA VISUAALISTA SELKEYTTÄ

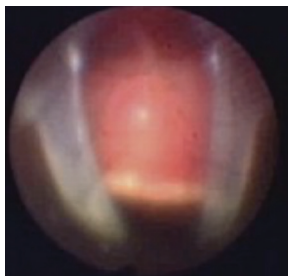

Kilpaileva ILA



Air-Q®3-sarja kurkunkannen nostajalla



Air-Q*3


Air-Q*sp3

Air-Q*3G

Air-Q*sp3G

NELJÄ VERSIOTA INTUBAATIOVAATIMUSTEN OSALTA:

- Air-Q*3 — poikkeuksellisen helppo ETT:n asettaminen odottamattomien intubaatioiden kohdalla.
- Air-Qsp3 — sisältää automaattisesti paineistettavan mansetin, joka käyttää positiivista paineentilaatiolähdettä. Automaattinen täyttö potilaskohtaiseen, optimoituun paineeseen tiivistyksen muodostamiseksi.
- Air-Q3G — sisältää erityisen leveän mahaliittimen ja kaksi mahakanavaa, joissa on OG-putket, enintään 18 Fr.
- Air-Qsp3G — sisältää erityisen leveän mahaliittimen ja kaksi mahakanavaa, joissa on OG-putket, enintään 18 Fr. Sisältää myös automaattisesti paineistettavan mansetin, joka käyttää positiivista paineentilaatiolähdettä.

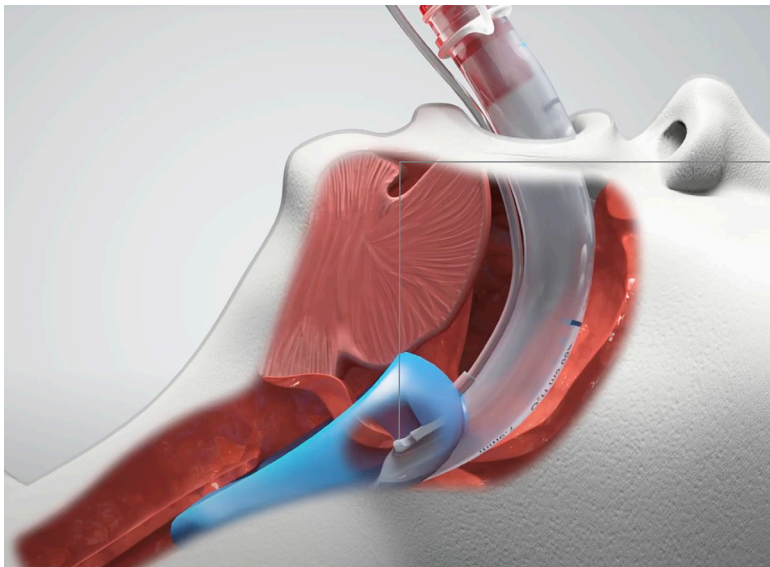

Kurkunkannen nostaja

ETT-ohjainramppi

Ainutlaatuinen, patentoitu kurkunkannen nostaja, auttaa nostamaan kurkunkannen turvallisesti niin, että hengitysteihin päästään käsi ensimmäisen kerran.



KERTAKÄYTTÖISET POISTOKOETTIMET

KOHTA	KOKO	KOKO AIRQ3	SUURIN ET	RUUMIIN PAINO	PK
10-1006	00	0 - 1,5	4,5 mm	0 - 17 kg	10
10-1005	0	2 - 3	6,0 mm	17 - 60 kg	10
10-1004	1	4 - 5	9,0 mm	> 60 kg	10



SUPRAGLOTTINEN AIR-Q®3-ILMATIE 15 MM:N LIITTIMELLÄ

KOHTA	KUVAUS	KOKO	IHANTEELLINEN RUUMIINPAINO	SUURIN ET	SUUAUKKO	PUTKEN PITUUS	SUURIN OG-PUTKI	TÄYTTÖ-TILAVUUS
30005	Air-Q3	0	< 2 kg	3,0 mm	5 mm	6.43 cm	—	4 ml
30055	Air-Q3	0,5	2–4 kg	4,0 mm	8 mm	7.69 cm	—	7 ml
30105	Air-Q3	1	4–7 kg	4,5 mm	11 mm	8.88 cm	—	10 ml
30155	Air-Q3	1,5	7–17 kg	5,0 mm	14 mm	10.5 cm	—	14 ml
30205	Air-Q3	2	17–30 kg	5,5 mm	17 mm	11.62 cm	—	20 ml
30305	Air-Q3	3	30–60 kg	7,0 mm	20 mm	13.08 cm	—	30 ml
30405	Air-Q3	4	60–80 kg	8,0 mm	23 mm	15 cm	—	40 ml
30505	Air-Q3	5	> 80 kg	9,0 mm	25 mm	16.5 cm	—	50 ml
50005	Air-Q3G	0	< 2 kg	3,0 mm	5 mm	6.67 cm	5 Fr	4 ml
50055	Air-Q3G	0,5	2 – 4 kg	4,0 mm	8 mm	7.81 cm	6 Fr	7 ml
50105	Air-Q3G	1	4–7 kg	4,5 mm	11 mm	9.16 cm	8 Fr	10 ml
50155	Air-Q3G	1,5	7–17 kg	5,0 mm	14 mm	10.98 cm	8 Fr	14 ml
50205	Air-Q3G	2	17–30 kg	5,5 mm	17 mm	11.52 cm	10 Fr	20 ml
50305	Air-Q3G	3	30–60 kg	7,0 mm	20 mm	14.36 cm	14 Fr	30 ml
50405	Air-Q3G	4	60–80 kg	8,0 mm	23 mm	15.37 cm	16 Fr	40 ml
50505	Air-Q3G	5	> 80 kg	9,0 mm	25 mm	17.75 cm	18 Fr	50 ml
40005	Air-Qsp3	0	< 2 kg	3,0 mm	5 mm	6.29 cm	—	—
40055	Air-Qsp3	0,5	2 – 4 kg	4,0 mm	8 mm	7.78 cm	—	—
40105	Air-Qsp3	1	4–7 kg	4,5 mm	11 mm	9.02 cm	—	—
40155	Air-Qsp3	1,5	7–17 kg	5,0 mm	14 mm	~10.5 cm	—	—
40205	Air-Qsp3	2	17–30 kg	5,5 mm	17 mm	11.63 cm	—	—
40305	Air-Qsp3	3	30–60 kg	7,0 mm	20 mm	13.04 cm	—	—
40405	Air-Qsp3	4	60–80 kg	8,0 mm	23 mm	14.99 cm	—	—
40505	Air-Qsp3	5	> 80 kg	9,0 mm	25 mm	16.5 cm	—	—
60005	Air-Qsp3G	0	< 2 kg	3,0 mm	5 mm	6.86 cm	5 Fr	—
60055	Air-Qsp3G	0,5	2 – 4 kg	4,0 mm	8 mm	8.05 cm	6 Fr	—
60105	Air-Qsp3G	1	4–7 kg	4,5 mm	11 mm	9.29 cm	8 Fr	—
60155	Air-Qsp3G	1,5	7–17 kg	5,0 mm	14 mm	10.9 cm	8 Fr	—
60205	Air-Qsp3G	2	17–30 kg	5,5 mm	17 mm	11.61 cm	10 Fr	—
60305	Air-Qsp3G	3	30–60 kg	7,0 mm	20 mm	14.25 cm	14 Fr	—
60405	Air-Qsp3G	4	60–80 kg	8,0 mm	23 mm	15.37 cm	16 Fr	—
60505	Air-Qsp3G	5	> 80 kg	9,0 mm	25 mm	17.75 cm	18 Fr	—