



AIR-Q®3 新生儿尺寸

Air-Q®3 现提供最小尺寸的声门上气道，适用于最脆弱的婴儿患者。全新 0 号和 0.5 号气道导管适配所有四种 Air-Q3 型号。使用自加压型号在进行插入和通气时无需进行额外操作，而胃通道型号有助于处理胃内的分泌物和空气。



Air-Q®3 声门上气道

- 带有颜色编码的接头便于识别尺寸。可拆卸的系留连接器使气管插管能够通过气道插管插入。
- 符合解剖学弯曲的医用级硅胶气管，带有一体式牙垫
- 独立的会厌提升器可抬高会厌，以最大限度保证放置袖囊的位置
- 自加压袖囊充气由吸气/呼气压力控制。无需手动充气。*

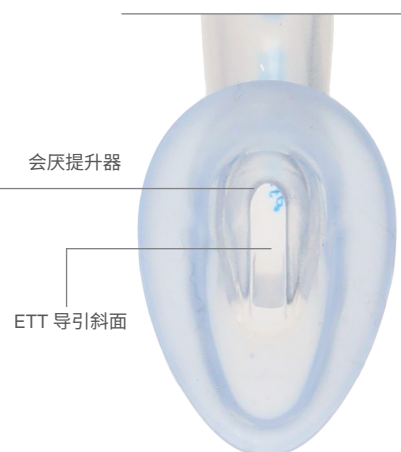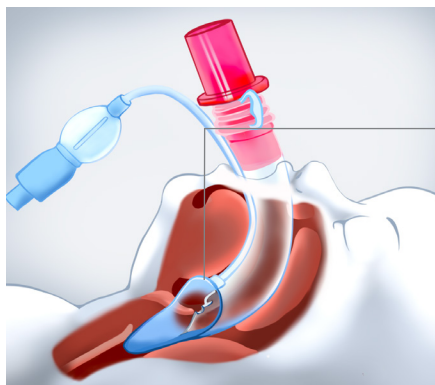

*仅限 Air-Qsp3 和 Air-Qsp3G 产品。

四种型号可满足不同插管需求：

- Air-Q®3 — 在意外需要插管时，也可轻松放置 ETT。
- Air-Qsp3 — 自加压式袖囊，使用正压通气设备。可自动充盈达到适合不同患者的特定压力，以形成良好密封性。
- Air-Q3G — 具有加宽胃入口和两个胃通道，最大可容纳 6 Fr 的 OG 管。
- Air-Qsp3G — 具有加宽胃入口和两个胃通道，可容纳最大 6 Fr 的 OG 管。还包括一个使用正压通气设备的自加压袖囊。



带有 15 MM 接头的 AIR-Q®3 新生儿声门上气道

项目	说明	尺寸	理想体重	最大经口气管导管	张口度	管长	最大经口胃管管尺寸	充气量
30005	Air-Q3	0	< 2 kg	3.0 mm	5 mm	6.43 cm	—	4 mL
30055	Air-Q3	0.5	2 – 4 kg	4.0 mm	8 mm	7.69 cm	—	7 mL
40005	Air-Qsp3	0	< 2.0 kg	3.0 mm	5 mm	6.43 cm	—	—
40055	Air-Qsp3	0.5	2 – 4 kg	4.0 mm	8 mm	7.69 cm	—	—
50005	Air-Q3G	0	< 2 kg	3.0 mm	5 mm	6.43 cm	5 Fr	4 mL
50055	Air-Q3G	0.5	2 – 4 kg	4.0 mm	8 mm	7.69 cm	6 Fr	7 mL
60005	Air-Qsp3G	0	< 2.0 kg	3.0 mm	5 mm	6.43 cm	5 Fr	—
60055	Air-Qsp3G	0.5	2 – 4 kg	4.0 mm	8 mm	7.69 cm	6 Fr	—